

96穴のウェルプレートやマイクロチューブを確実に攪拌。 攪拌速度300~2500r/min。シンプルで使いやすい ウェルプレート/チューブミキサー。

- 特長**
- 96穴ウェルプレートやマイクロチューブの攪拌に最適
 - 低速から高速まで安定した攪拌
 - マイクロチューブ用のラックは別売
- 用途**
- 酵素反応の促進(マウステールの酵素消化等)
 - ELISA反応の促進、バイオパニング等
 - プラスミドDNA抽出等



マイクロチューブラック(別売)使用例




ウェルプレート用振とう台(別売)使用例
(標準でウェルプレート×2を固定可能ですが、オプションもあります。詳細は下記)



タイテックのホームページ『タイテック・オンライン』には、この製品の他にも様々な振とう機・攪拌機の動画が掲載されているから機種選定の参考になると思うよ。


水平偏芯震動による振とうについて

水平偏芯震動は、容器を手持ちで1本ずつ攪拌する試験管ミキサーのような攪拌効果を、複数並列したマイクロチューブに均等にかけるために考案された方式です。0.5/1.5mLマイクロチューブに最適化した本製品の水平偏芯震動は、96穴マイクロプレートや同ディープウェルの攪拌にも有効です。

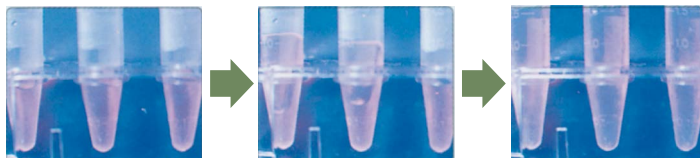


マイクロチューブ内の攪拌の様子
Web(タイテック・オンライン)で動画をご覧頂けます。

●外形図

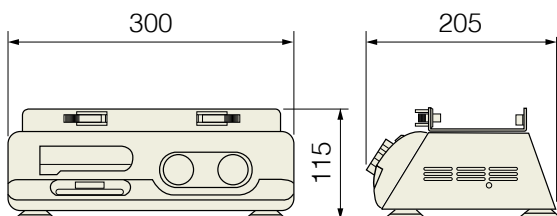

●オプション: マイクロチューブラックほか

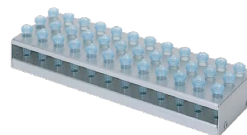

EM-1036



WP-9602

品名/型名	適用容器/備考	価格
マイクロチューブラック EM-0836	0.5mL×36 外寸: 262×82×32Hmm	¥15,000
マイクロチューブラック EM-1036	1.5mL×36 外寸: 262×82×32Hmm	¥15,000
ウェルプレート用振とう台 WP-9602	ディープウェルや標準架台で固定できないマイクロプレート用、2個架、標準架台をはずして付け替えます。	¥42,000

更に詳しい情報は QR コードまたは <https://taitec.info/2024b/66> にて

●製品Web ●動画: 1.5mLマイクロチューブ、水平偏芯震動の様子

●より均一性と安定性が向上した上位モデル→P.064

